

Semplicemente RESPIMAT®



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
Hochbergerstrasse 60B, 4002 Basilea




RESPIMAT®

COME USARE BENE IL DISPOSITIVO RESPIMAT® – Punti chiave da ricordare




Prima di cominciare

- impiegare il tempo sufficiente per la corretta applicazione del medicamento
- assumere la posizione eretta o seduta
- verificare il numero di dosi rimanenti
- chiudere il cappuccio

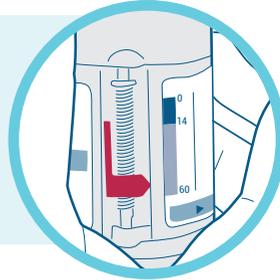

1 Ruotare la base trasparente di mezzo giro, fino a percepire un clic.

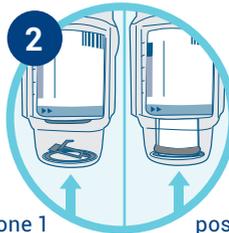


posizione 1 posizione 2

2 Controllare che la cartuccia sia in posizione 2.



3 Aprire completamente il cappuccio.

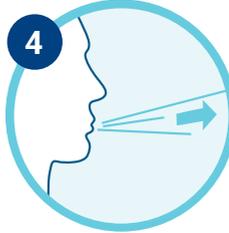

4 Espirare a fondo al di fuori del bocaglio.



5 Serrare le labbra attorno al bocaglio, senza coprire le 2 aperture, mantenendo RESPIMAT® orizzontalmente.



6 Avviare una lenta inspirazione e premere il pulsante. Continuare a inspirare a fondo e poi trattenere il respiro per 5-10 secondi.



7 Richiudere il cappuccio e controllare che la cartuccia sia in posizione 1 (figura 2).

8 Ripetere i punti da 1 a 7 (2 spruzzi 1 volta al giorno).

Pulire il bocaglio almeno una volta la settimana. Utilizzare solo un panno o un fazzolettino di carta inumidito. Tenere RESPIMAT® in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

ANNOTARE LE APPLICAZIONI FINO ALL'APPUNTAMENTO SUCCESSIVO



Per seguire meglio il trattamento, annotare le inalazioni nella tabella sottostante. Per il successo del trattamento, è importante ripetere alla stessa ora l'**applicazione di 2 spruzzi**. Ricordarsi di mostrare la tabella al medico in occasione del successivo appuntamento.

1ª settimana

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Data: _____						
Ora: _____						

2ª settimana

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Data: _____						
Ora: _____						

3ª settimana

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Data: _____						
Ora: _____						

Preparare le domande per la visita successiva.

Timbro del medico

PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO PRIMA DEL PRIMO USO



1

Premere il nottolino di sicurezza durante la rimozione della base trasparente con l'altra mano.



2

Inserire la cartuccia completamente, fino a percepire un clic.



3

Chiusura. Rimettere la base trasparente, fino a percepire un clic.



4

Avviamento. Ruotare la base di mezzo giro, fino a percepire un clic.



5

Aprire completamente il cappuccio.



6

Attivazione. Orientare l'inalatore RESPIMAT® verso il pavimento e quindi premere il pulsante per rilasciare la dose.

7

Chiudere il cappuccio e ripetere i punti 4-6, fino a vaporizzare una nube visibile. Dopo la vaporizzazione di una nube visibile, ripetere i punti 4-6 per tre volte.

Se necessario, è possibile chiedere aiuto al farmacista o al proprio medico per la preparazione del dispositivo RESPIMAT®.